

**NovaPED**  
by schein

**ORTHOPÄDISCHE EINLAGENROHLINGE** ORTHOPAEDIC INSOLE BLANKS  
**LAGERSORTIMENT** WAREHOUSE RANGE



**schein** orthopädie  
service  
— Germany since 1879 —

**Wir helfen**



**PRODUKT  
SUCHE**  
PRODUCT  
SEARCH



**HIER FÜHLE  
ICH MICH GUT  
BERATEN!**

I FEEL WELL  
ADVISED HERE!





## **PRODUKTSUCHE** PRODUCT SEARCH



Über unsere Produktsuche finden Sie immer den passenden Einlagenrohling.

You will always find the right insole blank via our product search.

## **UNSER KUNDENSERVICE IST GERNE FÜR SIE DA! SCHEIN DIREKT**

TEL.: +49 2191 910-200

FAX: +49 2191 910-100

Montag bis Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr

Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr

## **OUR CUSTOMER SERVICE WILL BE GLAD TO BE AT YOUR DISPOSAL SCHEIN DIRECT**

TEL.: +49 2191 910-200

FAX: +49 2191 910-100

Monday to Thursday 08.00 to 18.00

Friday 08.00 to 17.00

## **BESTELLSYSTEM** ORDER SYSTEM

Registrieren Sie sich als Kunde unter <https://shop.schein.de> und geben Sie Ihre Bestellung direkt in unser System ein. Hier finden Sie in den Kategorien Einlagen, Schuhe, Material, Werkzeuge und Maschinen unsere Produkte und können diese zu jeder Zeit einfach und bequem bestellen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ihre Bestellungen können Sie einfacher, schneller und jeder Zeit tätigen und gewinnen so mehr Zeit für Ihre Kunden.

Register as a customer at <https://shop.schein.de> and enter your order directly into our system. You will find our products there, separated into the categories insoles, shoes, materials, tools and machines, and can order them easily and conveniently at any time. The benefits are clear: you can place your Schein orders more easily, quickly and any time, freeing up more time for your customers.


# INHALTSVERZEICHNIS

## TABLE OF CONTENTS

### KUNSTSTOFF EINLAGENROHLINGE

SYNTHETIC INSOLE BLANKS




NOVAPED S90 SKIN (Sneaker/Business)	 <b>6</b>
NOVAPED S90 SKIN CALCANEUS (Sneaker/Business)	<b>7</b>
NOVAPED S90 SKIN HALLUX	<b>8</b>
NOVAPED S90 NOVATHERM	<b>9</b>

### SENSOMOTORISCHE EINLAGENROHLINGE

SENSOMOTORIC INSOLE BLANKS




NOVAPED SENSOCAD (neutral)	 <b>16</b>
NOVAPED SENSOCAD (planovalgus/adductus)	<b>17</b>
NOVAPED SENSOCAD (cavus/equinus)	<b>18</b>

### WEICHPOLSTER EINLAGENROHLINGE

SOFT CUSHIONING INSOLE BLANKS



NOVAPED SOFT	 <b>10/11</b>
NOVAPED SOFT (einschichtig/single layer)	<b>12</b>
NOVAPED SOFT CALCANEUS	<b>13</b>

### KINDER EINLAGENROHLINGE

KIDS INSOLE BLANKS




NOVAPED S90 PLATEAU (schalig/cup-shaped)	 <b>19</b>
--	---

### PU EINLAGENROHLINGE

PU INSOLE BLANKS




NOVAPED PU (individuell/individual)	 <b>14</b>
NOVAPED PU (Bezug/cover)	<b>15</b>

### SPORT EINLAGENROHLINGE

SPORTS INSOLE BLANKS



NOVAPED PERFORMANCE (soft)	 <b>20</b>
NOVAPED PERFORMANCE (medium/plus)	<b>21</b>
NOVAPED SPORTS	<b>22</b>
NOVAPED ACTIVE	<b>23</b>

**SICHERHEITS EINLAGENROHLINGE**  
SAFETY INSOLE BLANKS



SOFT PROTECT

  
**24/25**

**BASIS EINLAGENROHLINGE**  
BASIC INSOLE BLANKS



NOVAPED FLEX BASIC

NOVAPED FLEX BASIC CALCANEUS

NOVAPED SOFT BASIC

NOVAPED KORK BASIC

  
**26**

**27**

**28**

**29**

**INDIKATIONEN\***  
INDICATIONS\*



**NORMALFUSS**  
NORMAL FOOT



**KLUMPFUSS**  
CLUB FOOT



**SPREIZFUSS/METATARSALGIE**  
SPLAY FOOT/METATARSALGY



**SPITZFUSS**  
POINTED FOOT



**KNICKFUSS**  
SKEW FOOT



**HALLUX VALGUS**  
HALLUX VALGUS



**SENKFUSS/PLATTFUSS**  
FALLEN ARCHES/FLAT FOOT



**HALLUX RIGIDUS/LIMITUS**  
HALLUX RIGIDUS/LIMITUS



**HOHLFUSS**  
HIGH ARCHES



**FERSENSPORN/PLANTARFASZIITIS**  
HEEL SPUR/PLANTARFASCIITIS



**SICHELFUSS**  
PIGEON TOES

\* Die Einlagenrohlinge können durch entsprechende Weiterverarbeitung nach ärztlicher Verordnung durch einen Gesundheitshandwerker individuell für einen Kunden zu einer indikationsbezogenen Sonderanfertigung werden.


\* In line with a medical prescription, these insole blanks can be suitably individually adjusted for a customer by a healthcare technician into a indication-related special construction.



# NOVAPED S90 SKIN

Der stützende Einlagenrohling in Skin Folientechnik Novaped S90 Skin weist eine dünne und leichte Bauweise auf mit optimaler Unterstützung der Fußstruktur und hohem Tragekomfort. Der glasfaserverstärkte Einlagenkern bietet dabei eine hohe Stabilität im Längsgewölbe und in der Ferse. Zusätzliche Fersen- und Ballenpolster reduzieren punktuellen Druck bei Beschwerden im Fersen- und Ballenbereich. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch verformen/anformen und für eine individuelle Anpassung einfach beschleifen.

The Novaped S90 Skin supporting insole blank with skin film technology has a thin and lightweight design with optimal support of the foot structure and a high level of wearing comfort. The glass-fibre-reinforced insole core provides high stability in the longitudinal arch and heel. Additional heel and bunion pads reduce localised pressure in the event of heel and bunion complaints. The insole blank can be thermoformed/ shaped and easily ground for an individual fit.

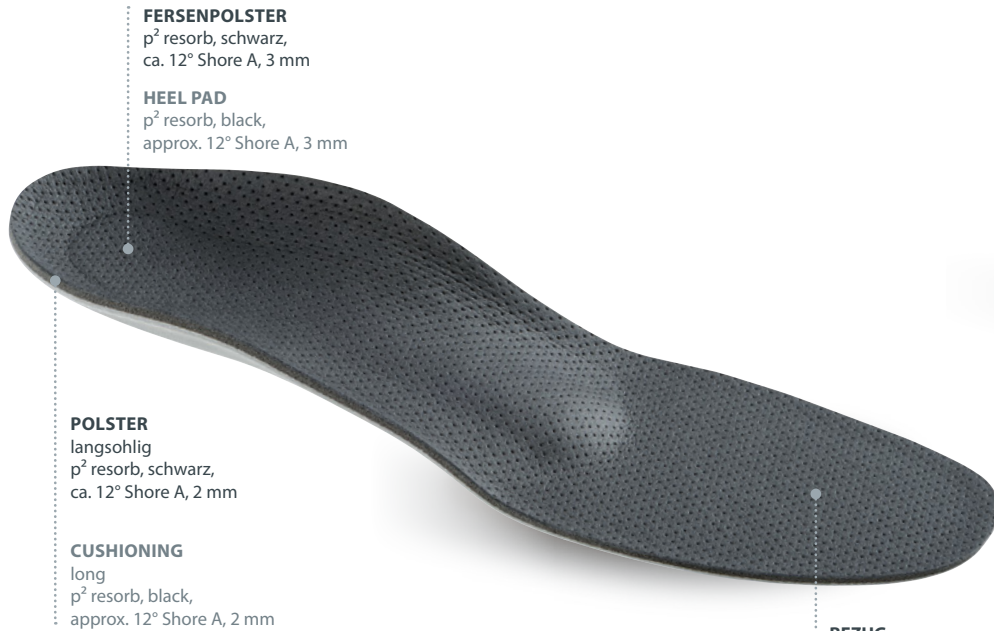

**FERSENPOLSTER**  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz,  
ca. 12° Shore A, 3 mm

**HEEL PAD**  
p<sup>2</sup> resorb, black,  
approx. 12° Shore A, 3 mm

**POLSTER**  
langsohlig  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz,  
ca. 12° Shore A, 2 mm


**CUSHIONING**  
long  
p<sup>2</sup> resorb, black,  
approx. 12° Shore A, 2 mm

**UNTERBAU**  
Skin Folientechnik, weiß

**BASE**  
skin film technology, white

**VERSTÄRKUNG**  
Scheinflex/Scheinflex Plus

**REINFORCEMENT**  
Scheinflex/Scheinflex Plus

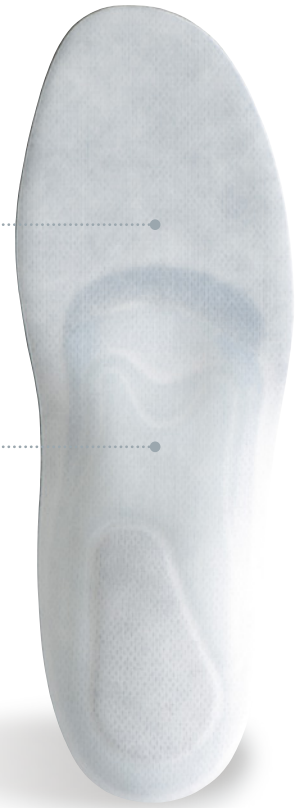

**BEZUG**  
OnDry geprägt, dunkelgrau

**COVER**  
OnDry embossed, dark grey

ART.-NR.  
CODE NO.  
989810000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	BESONDERHEIT CHARACTERISTICS	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989810000	35-50	S90 Skin Sneaker S90 Skin Sneaker	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	p <sup>2</sup> resorb, schwarz p <sup>2</sup> resorb, black	Fersenpolster heel pad	anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal
989808968	35-48	S90 Skin Business S90 Skin Business	-	-	Fersen- und Ballenpolster heel and bunion pad	-	schmal narrow

PRODUKTALTERNATIVE  
PRODUCT ALTERNATIVE



**S90 SKIN BUSINESS**  
ohne Bezug und Pelotte  
Ballenpolster, p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 2 mm  
Fersenpolster, p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 3 mm

**S90 SKIN BUSINESS**  
without cover and pad  
bunion pad, p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 2 mm  
heel pad, p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 3 mm




ART.-NR.  
CODE NO.  
989808968

# NOVAPED S90 SKIN CALCANEUS

Der stützende Einlagenrohling in Skin Folientechnik Novaped S90 Skin Calcaneus ist speziell für den Einsatz bei Überlastungssymptomen oder Schmerzen im Bereich des Calcaneus konzipiert. Die Fußstruktur wird gezielt unterstützt und entlastet. Durch eine anatomisch angepasste Aussparung in der Fersenmitte und Tieferlegung der plantaren Sehnenstruktur gepaart mit dem Einsatz einer durchdachten Polsterkombination. Glasfaserverstärkte Bauteile erhöhen dabei die Stabilität im Längsgewölbe. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch verformen/anformen und für eine individuelle Anpassung einfach beschleifen.

The Novaped S90 Skin Calcaneus supportive insole blank with skin film technology is specially designed for use in cases of overuse symptoms or pain in the calcaneus area. The foot structure receives targeted support and relief through an anatomically adapted cutout in the centre of the heel and lowering of the plantar tendon structure paired with the use of a sophisticated cushioning combination. Glass-fibre-reinforced components increase stability in the longitudinal arch. The insole blank can be thermoformed/shaped and easily ground for an individual fit.

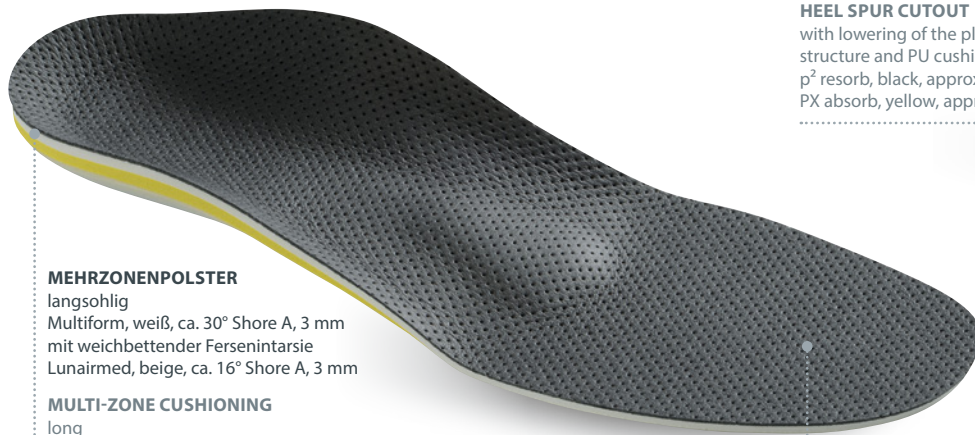

## MEHRZONENPOLSTER

langsohlig  
Multiform, weiß, ca. 30° Shore A, 3 mm  
mit weichbettender Fersenintarsie  
Lunairmed, beige, ca. 16° Shore A, 3 mm

## MULTI-ZONE CUSHIONING

long  
Multiform, white, approx. 30° Shore A, 3 mm  
with soft heel inlay  
Lunairmed, beige, approx. 16° Shore A, 3 mm

ART.-NR.  
CODE NO.  
989820000

## UNTERBAU

Skin Folientechnik, weiß

## BASE

skin film technology, white

## VERSTÄRKUNG

Scheinflex/Scheinflex Plus

## REINFORCEMENT

Scheinflex/Scheinflex Plus

## FERSENSPORN-AUSSPARUNG

mit Tieferlegung der Plantarsehnenstruktur und PU-Polstermaterialien  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 3 mm  
PX absorb, gelb, ca. 13° Shore A, 3 mm

## HEEL SPUR CUTOUT

with lowering of the plantar tendon structure and PU cushioning materials  
p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 3 mm  
PX absorb, yellow, approx. 13° Shore A, 3 mm



## BEZUG

OnDry geprägt, dunkelgrau

## COVER

OnDry embossed, dark grey



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989820000	35-50	S90 Skin Calcaneus Sneaker S90 Skin Calcaneus Sneaker	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, weiß/Lunairmed, beige Multiform, white/Lunairmed, beige	anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal
989820174	35-50	S90 Skin Calcaneus Sneaker, unverklebt S90 Skin Calcaneus Sneaker, unbonded	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, weiß/Lunairmed, beige Multiform, white/Lunairmed, beige	anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.  
CODE NO.  
989820174

## S90 SKIN CALCANEUS SNEAKER, UNVERKLEBT

Bezug mit Polster und Pelotte beiliegend  
Fersenpolster, p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 3 mm  
Fersenpolster, PX absorb, gelb, ca. 13° Shore A, 3 mm

## S90 SKIN CALCANEUS SNEAKER, UNBONDED

cover with cushioning and pad enclosed  
heel pad, p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 3 mm  
heel pad, PX absorb, yellow, approx. 13° Shore A, 3 mm



# NOVAPED S90 SKIN HALLUX

Der Einlagenrohling Novaped S90 Skin Hallux ist speziell für den Einsatz bei Bewegungseinschränkungen des Großzehengrundgelenks entwickelt. Dabei „schient“ die Rigidusfeder das Großzehengrundgelenk und limitiert dessen Beweglichkeit. Die dünne und leichte Bauweise mit glasfaserverstärktem Einlagenkern bietet hohe Stabilität und optimale Unterstützung der Fußstruktur mit hohem Tragekomfort. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch verformen/ anformen und für eine individuelle Anpassung einfach beschleifen.

The Novaped S90 Skin Hallux insole blank is specially designed for use in cases of restricted movement of the metatarsophalangeal joint of the big toe. The rigidus spring ‘splints’ the metatarsophalangeal joint of the big toe and limits its mobility. The thin and lightweight design with a glass-fibre-reinforced insole core provides high stability and optimal support of the foot structure with a high level of wearing comfort. The insole blank can be thermoformed/shaped and easily ground for an individual fit.



**POLSTER**  
langsohlig  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz,  
ca. 12° Shore A, 2 mm

**CUSHIONING**  
long  
p<sup>2</sup> resorb, black,  
approx. 12° Shore A, 2 mm

**BESONDERHEIT**  
lange Rigidusfeder

**CHARACTERISTICS**  
long rigidus spring

**UNTERBAU**  
Skin Folientechnik, weiß

**BASE**  
skin film technology, white

**VERSTÄRKUNG**  
Scheinflex/Scheinflex Plus

**REINFORCEMENT**  
Scheinflex/Scheinflex Plus



**BEZUG**  
OnDry geprägt, dunkelgrau

**COVER**  
OnDry embossed, dark grey

ART.-NR.  
CODE NO.  
989899000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989899000	35-48	S90 Skin Hallux S90 Skin Hallux	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	p <sup>2</sup> resorb, schwarz p <sup>2</sup> resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal
989899968	35-48	S90 Skin Hallux S90 Skin Hallux	-	-	-	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



**S90 Skin Hallux**  
ohne Bezug, Polster und Pelotte

**S90 Skin Hallux**  
without cover, cushioning and pad



ART.-NR.  
CODE NO.  
989899968



# NOVAPED S90 NOVATHERM

Der in Folientechnik hergestellte Novaped S90 Novatherm Einlagenrohling zeichnet sich durch seine geringe Stärke, extreme Flexibilität und weiche formstabile Kanten aus. Er weist ein moderates Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse auf. Die Versteifung aus Scheinflex sorgt dabei für eine hohe Stützfunktion. Das Material lässt sich außerdem hervorragend thermoplastisch verformen und individuell gestalten.

The Novaped S90 Novatherm insole blank, manufactured using film technology, is characterised by its low thickness, extreme flexibility and soft, but inherently stable, edges. It has a moderate longitudinal arch with a slightly guided heel. The reinforcement made of Scheinflex provides a high level of support. The material is thermoplastic, making it ideal to reshape and customise.

## UNTERBAU

Folientechnik, transparent

## BASE

film technology, transparent

## VERSTÄRKUNG

Scheinflex

## REINFORCEMENT

Scheinflex

KUNSTSTOFF  
SYNTHETIC



ART.-NR.  
CODE NO.  
955159300




ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
955159300	35-48	S90 Novatherm S90 Novatherm	-	-	-	universal universal

# NOVAPED SOFT

Der Novaped Soft Einlagenrohling ist in Weichpolstertechnik gefertigt und sorgt für eine effektive Druckentlastung mit hohem Komfort. Die Basis bildet ein weiches und dennoch formstabiles Multiform-Material. In Kombination mit dem Bezugsmaterial aus Pigreco wird der Tragekomfort zusätzlich gesteigert. Der Rohling lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Soft insole blank is made using soft cushioning technology and provides effective pressure relief with a high level of comfort. The base is a soft and stable Multiform material. The wearing comfort is further increased by the Pigreco cover. It can be thermally formed and easily processed, making quick and easy individual adaptation to the user's foot possible.

WEICHPOLSTER  
SOFT CUSHIONING

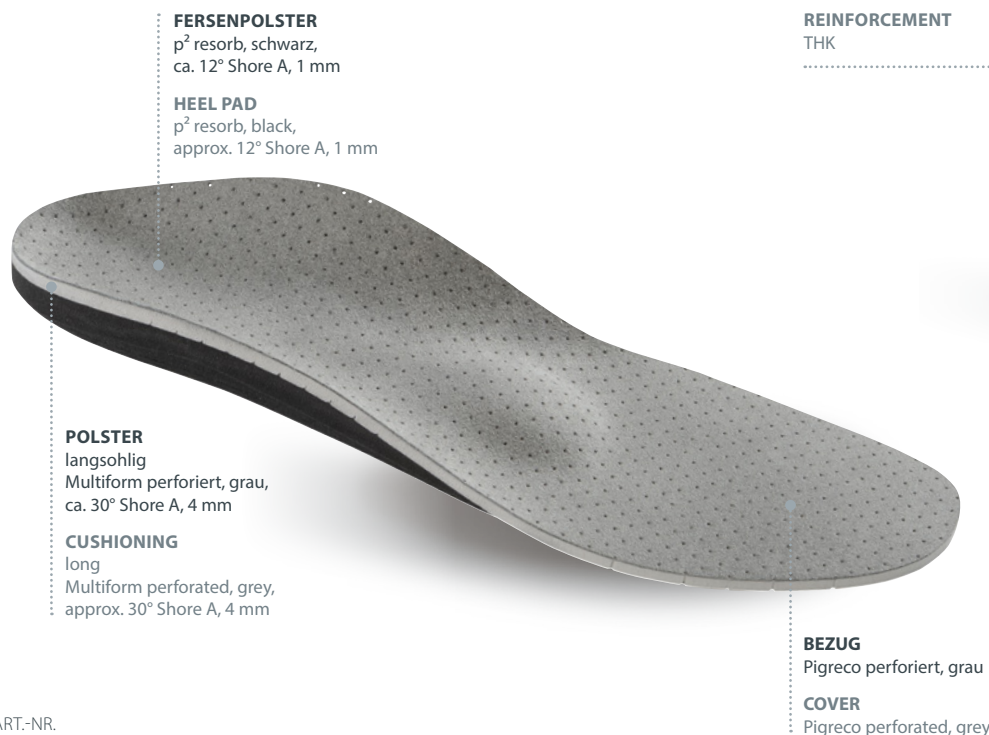

**FERSENPOLSTER**  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz,  
ca. 12° Shore A, 1 mm

**HEEL PAD**  
p<sup>2</sup> resorb, black,  
approx. 12° Shore A, 1 mm

**POLSTER**  
langsohlig  
Multiform perforiert, grau,  
ca. 30° Shore A, 4 mm

**CUSHIONING**  
long  
Multiform perforated, grey,  
approx. 30° Shore A, 4 mm

**UNTERBAU**  
Multiforte, schwarz,  
ca. 40° Shore A, 12 mm

**BASE**  
Multiforte, black,  
approx. 40° Shore A, 12 mm

**VERSTÄRKUNG**  
THK

**REINFORCEMENT**  
THK

**BEZUG**  
Pigreco perforiert, grau

**COVER**  
Pigreco perforated, grey

ART.-NR.  
CODE NO.  
974804000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
974804000	35-50	Soft Soft	Pigreco perforiert, grau Pigreco perforated, grey	Multiform, grau Multiform, grey	Multiform, schwarz Multiform, black	Tropfenform drop shape	universal universal



# NOVAPED SOFT

Der Novaped Soft Einlagenrohling ist in Weichpolstertechnik gefertigt und sorgt für eine effektive Druckentlastung mit hohem Komfort. Die Basis bildet ein weiches und dennoch formstabiles Multiform-Material. Es lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Soft insole blank is made using soft cushioning technology and provides effective pressure relief with a high level of comfort. The base is a soft and stable Multiform material. It can be thermally formed and easily processed, making quick and individual adaptation to the users foot possible.



**FERSENPOLSTER**  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz,  
ca. 15° Shore A, 1 mm

**HEEL PAD**  
p<sup>2</sup> resorb, black,  
approx. 15° Shore A, 1 mm

**POLSTER**  
langsohlig  
Multiform perforiert, blau,  
ca. 30° Shore A, 4 mm

**CUSHIONING**  
long  
Multiform perforated, blue,  
approx. 30° Shore A, 4 mm

**UNTERBAU**  
Multiforte, weiß,  
ca. 40° Shore A, 10 mm

**BASE**  
Multiforte, white,  
approx. 40° Shore A, 10 mm

**VERSTÄRKUNG**  
THK

**REINFORCEMENT**  
THK



WEICHPOLSTER  
SOFT CUSHIONING

ART.-NR.  
CODE NO.  
974814177



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
974814177	35-48	Soft Soft	-	Multiform, blau Multiform, blue	Multiform, weiß Multiform, white	Tropfenform drop shape	universal universal

# NOVAPED SOFT

Der einschichtige Novaped Soft Einlagenrohling sorgt für eine effektive Druckentlastung. Bestehend aus weichem Multiform-Material ist der Einlagenrohling gleichzeitig formstabil, sodass er Überlastungen entgegengewirkt und Druckspitzen flächig verteilt werden. Das vorgeformte Längsgewöbe ist moderat gehalten und die Ferse leicht geführt. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten.

The single-layer Novaped Soft insole blank provides effective pressure relief. Made of soft Multiform material, the insole blank is dimensionally stable at the same time, so that overloading is counteracted and pressure peaks are distributed evenly. The pre-shaped longitudinal arch is kept moderate and the heel is lightly guided. The insole blank can be thermally formed and easily processed.

## BESONDERHEIT

Vorfuß-Vorschliff

## CHARACTERISTICS


pre-ground forefoot

## UNTERBAU

Multiform, weiß,  
ca. 30° Shore A, 15 mm

## BASE

Multiform, white,  
approx. 30° Shore A, 15 mm

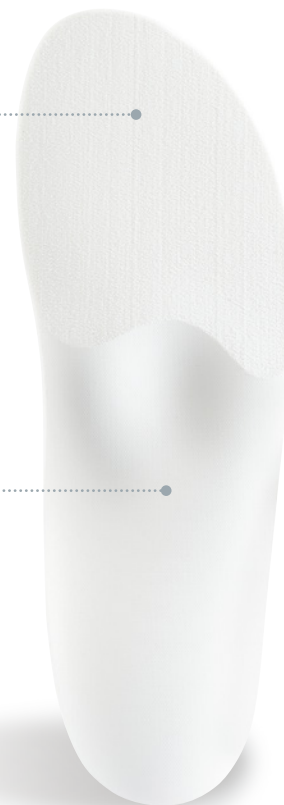

ART.-NR.  
CODE NO.  
877851000




ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
877851000	35-48	Soft, einschichtig Soft, single layer	-	-	Multiform, weiß Multiform, white	Tropfenform drop shape	Bequemschuhform comfort shoe shape



# NOVAPED SOFT CALCANEUS

Der bettende Einlagenrohling Novaped Soft Calcaneus in Weichpolstertechnik ist speziell für den Einsatz bei Überlastungssymptomen oder Schmerzen im Bereich des Calcaneus konzipiert. Für eine gezielte Entlastung der Fußstruktur sorgt der formgebende Unterbau aus Multiforte durch den Einsatz von entlastenden (p<sup>2</sup> resorb) oder absorbierenden (p<sup>2</sup> absorb) PU-Materialien, gepaart mit einer besonderen langsohligen Multiform-Polsterung in Mehrzonentechnik. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch anformen und einfach beschleifen.

The Novaped Soft Calcaneus bedding insole blank with soft padding technology is specially designed for use in case of overuse symptoms or pain in the area of the calcaneus. The shaping base made of Multiforte provides targeted relief for the foot structure through the use of relieving (p<sup>2</sup> resorb) or absorbing (p<sup>2</sup> absorb) PU materials paired with special long Multiform cushioning with multi-zone technology. The insole blank can be thermally formed and easily ground.

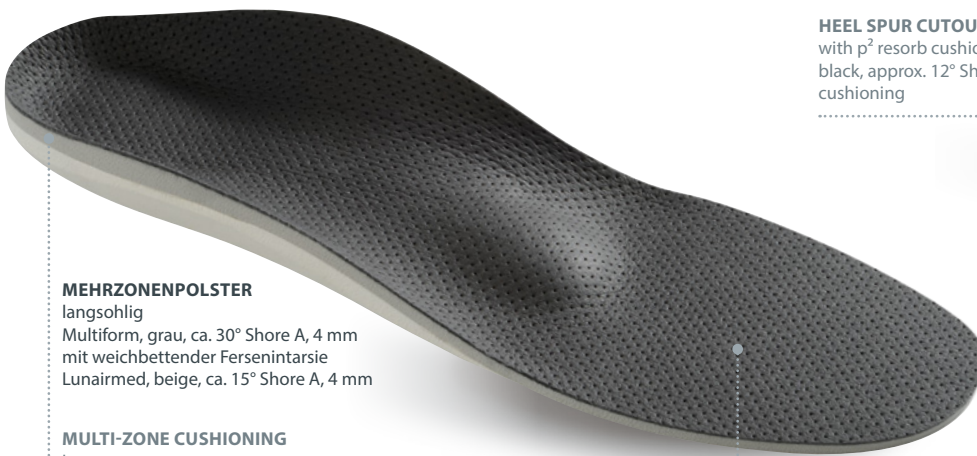

## MEHRZONENPOLSTER

langsohlig  
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 4 mm  
mit weichbettender Fersenintarsie  
Lunairmed, beige, ca. 15° Shore A, 4 mm

## MULTI-ZONE CUSHIONING

long  
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 4 mm  
with soft heel inlay  
Lunairmed, beige, approx. 15° Shore A, 4 mm

## UNTERBAU

Multiforte, weiß,  
ca. 40° Shore A, Vorschleiff

## BASE

Multiforte, white,  
approx. 40° Shore A, pre-ground

## VERSTÄRKUNG

THK

## REINFORCEMENT

THK

## FERSENSPORN-AUSSPARUNG

mit p<sup>2</sup> resorb-Polstermaterial,  
schwarz, ca. 12° Shore A,  
dämpfend

## HEEL SPUR CUTOUT

with p<sup>2</sup> resorb cushioning material,  
black, approx. 12° Shore A,  
cushioning

## BEZUG

OnDry geprägt, dunkelgrau

## COVER

OnDry embossed, dark grey



WEICHPOLSTER  
SOFT CUSHIONING

ART.-NR.  
CODE NO.  
979828000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979828000	35-50	Soft Calcaneus resorb Soft Calcaneus resorb	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, weiß/ Lunairmed, beige Multiform, white/ Lunairmed, beige	Multiforte, weiß/ p <sup>2</sup> resorb, schwarz Multiforte, white/ p <sup>2</sup> resorb, black	Tropfenform drop shape	universal universal
979825000	35-50	Soft Calcaneus absorb Soft Calcaneus absorb	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, weiß/ Lunairmed, beige Multiform, white/ Lunairmed, beige	Multiforte, schwarz/ p <sup>2</sup> absorb, grün Multiforte, black/ p <sup>2</sup> absorb, green	Tropfenform drop shape	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



### SOFT CALCANEUS ABSORB

Fersenpolster, p<sup>2</sup> absorb, grün, ca. 22° Shore A,  
stoßabsorbierend, entlastend

### SOFT CALCANEUS ABSORB

heel pad, p<sup>2</sup> absorb, green, approx. 22° Shore A,  
shock-absorbing, relieving



ART.-NR.  
CODE NO.  
979825000

# NOVAPED PU

Der Novaped PU Einlagenrohling wird aus einer hochwertigen PU-Schaumkomponente hergestellt. In seiner Struktur ist der Schaum flexibel, wirkt polsternd und druckentlastend. Die Rückstelleigenschaften des Materials gewährleisten eine zuverlässige Wirkweise. Die Decke aus Multiform-Material bietet eine zusätzliche bewährte Polsterung und ermöglicht eine sehr gute Verklebbarkeit und individuelle Weiterverarbeitung.

The Novaped PU insole blank is made of a high-quality PU foam component. The structure of the foam is flexible, cushioning and pressure-relieving. The recovery properties of the material guarantee a reliable effect. The Multiform material provides additional proven cushioning and enables very good gluing properties and individual finishing.

**BASISMODUL PU**  
weiß, ca. 35° Shore A

**BASE MODULE PU**  
white, approx. 35° Shore A

**VERSTEIFUNG**  
TPU

**REINFORCEMENT**  
TPU



**POLSTER**  
langsohlig  
Multiform, grau,  
ca. 30° Shore A, 1,5 mm

**CUSHIONING**  
long  
Multiform, grey,  
approx. 30° Shore A, 1,5 mm

ART.-NR.  
CODE NO.  
670130150



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
670130150	35-50	PU individuell PU individual	-	Multiform, grau Multiform, grey	Tropfenform drop shape	universal universal
670130300	35-50	PU individuell PU individual	-	Multiform, grau Multiform, grey	-	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



**PU individuell**  
ohne Pelotte

**PU individual**  
without pad



ART.-NR.  
CODE NO.  
670130300



# NOVAPED PU

Der Novaped PU Einlagenrohling wird aus einer hochwertigen PU-Schaumkomponente hergestellt. In seiner Struktur ist der Schaum flexibel, wirkt polsternd und druckentlastend. Die Rückstelleigenschaften des Materials gewährleisten eine zuverlässige Wirkweise. In Kombination mit dem OnDry-plus-Bezugsmaterial wird der Tragekomfort des Basismoduls PU gesteigert. Einen zusätzlichen Dämpfungskomfort bietet die Variante mit dem 1,5-mm-starken Polster aus orangefarbenem Multiform.

The Novaped PU insole blank is made of a high-quality PU foam component. The structure of the foam is flexible, cushioning and pressure-relieving. The recovery properties of the material guarantee a reliable effect. The wearing comfort of the PU base is further increased by the OnDry plus cover. Additional cushioning comfort is offered by the variant with a 1.5 mm Multiform orange cushioning material.

**BASISMODUL PU**  
weiß, ca. 35° Shore A

**BASE MODULE PU**  
white, approx. 35° Shore A

**VERSTEIFUNG**  
TPU

**REINFORCEMENT**  
TPU



**BEZUG**  
OnDry plus, jeans

**COVER**  
OnDry plus, denim



PU  
PU

ART.-NR.  
CODE NO.  
670110347



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
670110347	35-50	PU mit Bezug PU with cover	OnDry plus, jeans OnDry plus, denim	-	Tropfenform drop shape	universal universal
670160363	35-50	PU mit Bezug und Polster PU with cover and cushioning	OnDry plus, melange OnDry plus, melange	Multiform, orange Multiform, orange	Tropfenform drop shape	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



**PU MIT BEZUG UND POLSTER**  
OnDry plus, melange  
Multiform, orange, ca. 30° Shore A, 1,5 mm

**PU BASE WITH COVER AND CUSHIONING**  
OnDry plus, melange  
Multiform, orange, approx. 30° Shore A, 1,5 mm



ART.-NR.  
CODE NO.  
670160363

# NOVAPED SENSOCAD

Die gefrästen Novaped sensoCAD Einlagenrohlinge bieten eine ganzheitliche und aktive Versorgung des Trägers. Mit ihren speziell geformten Elementen üben die Einlagenrohlinge gezielte sensorische Reize auf die Fußsohle aus, welche motorische Reaktionen durch Muskelanspannung oder -entspannung hervorrufen. So können Fehlstellungen und Ungleichgewichte korrigiert werden. Die Novaped sensoCAD Einlagenrohlinge sind aus EVA Fräsmaterial mit einer Festigkeit von 35° Shore A gefertigt und auf der Unterseite mit Skin Folientechnik verstärkt.

The milled Novaped sensoCAD insole blanks provide holistic and active care for the user. With their specially shaped elements, the insole blanks exert targeted sensory stimuli on the sole of the foot, which cause motor reactions through muscle tension or relaxation. In this way, malpositions and imbalances can be corrected. The Novaped sensoCAD insole blanks are made of EVA milling material with a Shore A hardness of 35° and are reinforced on the underside with skin film technology.

INTENSITÄT DER SENSOMOTORISCHEN ELEMENTE  
INTENSITY OF SENSOMOTORIC ELEMENTS



leicht  
light



mittel  
medium



stark  
strong

SENSOMOTORISCH  
SENSORY



- \* • neutraler Gang (Ausgleichseinlage)
- Normalfuß (Ausgleichseinlage)
- neutral gait (balancing insole)
- normal foot (balancing insole)



**neutral**

ART.-NR.  
CODE NO.  
773501000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FRÄSMATERIAL MILLING MATERIAL	UNTERBAU BASE	AUSFÜHRUNG DESIGN
773501000	19-50	sensoCAD <b>neutral</b> , rechts sensoCAD <b>neutral</b> , right	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, orange skin film technology, orange	universal universal
773502000	19-50	sensoCAD <b>neutral</b> , links sensoCAD <b>neutral</b> , left	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, orange skin film technology, orange	universal universal




- \* • außenrotierter Gang
- Knickfuß
- Senkfuß
- Plattfuß
- externally rotated gait
- skew foot
- fallen arches
- flat foot



## planovalgus

ART.-NR.  
CODE NO.  
773511000

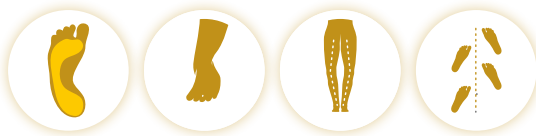

- \* • innenrotierter Gang
- Sichelfuß
- vorbehandelter Klumpfuß
- internally rotated gait
- pigeon toes
- previously treated club foot



## adductus

ART.-NR.  
CODE NO.  
773521000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FRÄSMATERIAL MILLING MATERIAL	UNTERBAU BASE	AUSFÜHRUNG DESIGN
773511000	19-50	sensoCAD <b>planovalgus</b> , rechts sensoCAD <b>planovalgus</b> , right	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, grün skin film technology, green	universal universal
773512000	19-50	sensoCAD <b>planovalgus</b> , links sensoCAD <b>planovalgus</b> , left	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, grün skin film technology, green	universal universal
773521000	19-50	sensoCAD <b>adductus</b> , rechts sensoCAD <b>adductus</b> , right	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, gelb skin film technology, yellow	universal universal
773522000	19-50	sensoCAD <b>adductus</b> , links sensoCAD <b>adductus</b> , left	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, gelb skin film technology, yellow	universal universal



# NOVAPED SENSOCAD



- \* • Hohlfuß
- high arches



## cavus

ART.-NR.  
CODE NO.  
773531000



SENSOMOTORISCH  
SENSORY



- \* • Zehenspitzenangang
- Spitzfuß
- walking on tiptoe
- pointed foot



## equinus

ART.-NR.  
CODE NO.  
773541000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FRÄSMATERIAL MILLING MATERIAL	UNTERBAU BASE	AUSFÜHRUNG DESIGN
773531000	19–50	sensoCAD cavus, rechts sensoCAD cavus, right	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, blau skin film technology, blue	universal universal
773532000	19–50	sensoCAD cavus, links sensoCAD cavus, left	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, blau skin film technology, blue	universal universal
773541000	19–50	sensoCAD equinus, rechts sensoCAD equinus, right	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, rot skin film technology, red	universal universal
773542000	19–50	sensoCAD equinus, links sensoCAD equinus, left	EVA Fräsmaterial, grau EVA milling material, grey	Skin Folientechnik, rot skin film technology, red	universal universal

# NOVAPED S90 PLATEAU

Der schalige Einlagenrohling Novaped S90 Plateau mit Fersenplateau bietet einen hohen Tragekomfort. Er stützt und korrigiert Fußfehlstellungen. Das Fersenplateau mit seiner vergrößerten Auflagefläche stabilisiert und verbessert im Stand die Kraftübertragung auf den Schuhboden.

The cup-shaped Novaped S90 Plateau insole blank with heel plateau offers a high level of comfort. It supports and corrects foot malpositions. The heel plateau with its enlarged support surface provides stability and improves transmission of force onto the sole of the shoe.



**POLSTER**  
langsohlig  
Multiform, orange,  
ca. 30° Shore A, 2 mm

**CUSHIONING**  
long  
Multiform, orange,  
approx. 30° Shore A, 2 mm

**BEZUG**  
Pigreco, orange

**COVER**  
Pigreco, orange

ART.-NR.  
CODE NO.  
980360000

**UNTERBAU**  
Folientechnik mit Textilunterfutter,  
transparent/blau

**BASE**  
film technology with textile underlining,  
transparent/blue

**VERSTÄRKUNG**  
Scheinflex

**REINFORCEMENT**  
Scheinflex

**FERSENPLATEAU**  
HEEL PLATEAU



KINDER  
KIDS


ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
980360000	19/20–33/34 35–47	S90 Plateau (schalig) S90 Plateau (cup-shaped)	Pigreco, orange Pigreco, orange	Multiform, orange Multiform, orange	Folientechnik film technology	–	schmal narrow

# NOVAPED PERFORMANCE

Von der Deckschicht bis zum Unterbau kombinieren die Novaped Performance Einlagenrohlinge unterschiedliche Materialeigenschaften, um eine optimale Bewegungsführung und -unterstützung zu ermöglichen. Abhängig von der Bewegungsart, Intensität und Umfang der Aktivität werden drei unterschiedliche Ausführungen angeboten: SOFT, MEDIUM und PLUS. Aufgrund der speziellen Verarbeitung des Unterbaus lassen sich die Einlagenrohlinge besonders effizient und zeitsparend weiterverarbeiten.

From the top layer to the substructure, the Novaped Performance insole blank combines different material properties to provide optimal movement guidance and support. Depending on the type of movement, intensity and scope of the activity, three different versions are offered: SOFT, MEDIUM and PLUS. Due to the special processing of the substructure, the insole blanks can be processed particularly efficiently and in a time-saving manner.

## für komfortable Alltagsaktivitäten for comfortable everyday activities

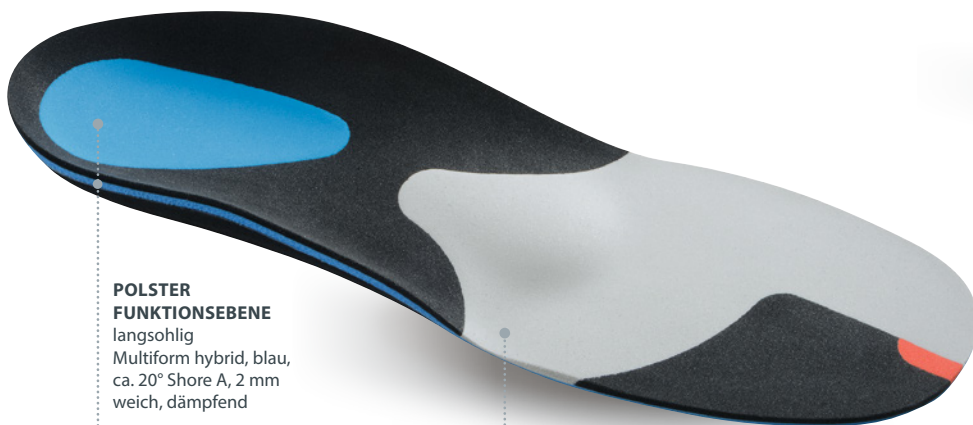

**POLSTER FUNKTIONSEBENE**  
langsohlig  
Multiform hybrid, blau,  
ca. 20° Shore A, 2 mm  
weich, dämpfend

**CUSHIONING FUNCTIONAL LEVEL**  
long  
Multiform hybrid, blue,  
approx. 20° Shore A, 2 mm  
soft, cushioning

**POLSTER MEHRZONENEbene**  
langsohlig  
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 2 mm  
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 2 mm  
Multiform hybrid, blau, ca. 20° Shore A, 2 mm

**CUSHIONING MULTI-ZONE LEVEL**  
long  
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 2 mm  
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 2 mm  
Multiform hybrid, blue, approx. 20° Shore A, 2 mm

**MEHRZONENUNTERBAU**  
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 12 mm

**MULTI-ZONE BASE**  
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 12 mm

**VERSTÄRKUNG THK**

**REINFORCEMENT THK**




ART.-NR.  
CODE NO.  
978110000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
978110000	35-48	Performance SOFT	Multiform hybrid, blau/Multiform, grau/Multiforte, schwarz Multiform hybrid, blue/Multiform, grey/Multiforte, black	Tropfenform drop shape	universal universal
978120000	35-48	Performance MEDIUM	p <sup>2</sup> absorb, grün/Multiform, grau/Multiforte, schwarz p <sup>2</sup> absorb, green/Multiform, grey/Multiforte, black	Tropfenform drop shape	universal universal
978130000	35-48	Performance PLUS	p <sup>2</sup> rebound, rot/Multiform, grau/Multiforte, schwarz p <sup>2</sup> rebound, red/Multiform, grey/Multiforte, black	Tropfenform drop shape	universal universal



**für dynamisch wechselnde Aktivitäten**  
for dynamic activities

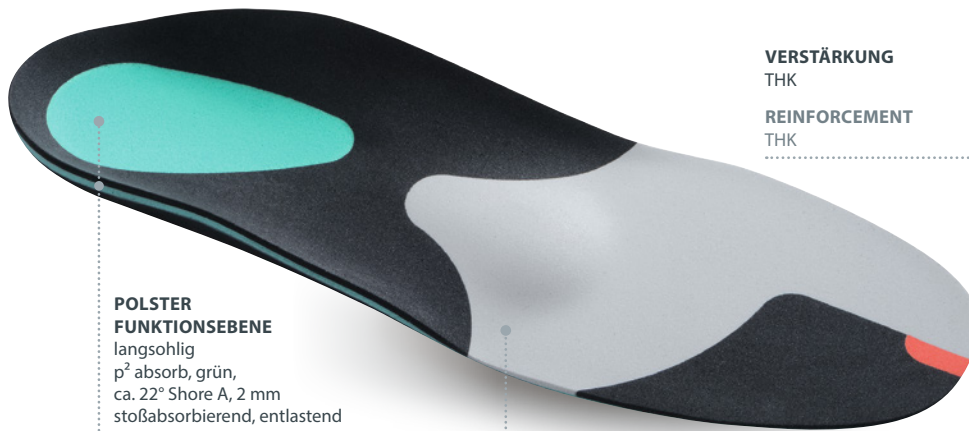

**POLSTER FUNKTIONSEBENE**  
langsohlig  
p<sup>2</sup> absorb, grün,  
ca. 22° Shore A, 2 mm  
stoßabsorbierend, entlastend

**CUSHIONING FUNCTIONAL LEVEL**  
long  
p<sup>2</sup> absorb, green,  
approx. 22° Shore A, 2 mm  
shock-absorbing, relieving

ART.-NR.  
CODE NO.  
978120000

**POLSTER MEHRZONENEbene**  
langsohlig  
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 2 mm  
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 2 mm  
p<sup>2</sup> absorb, grün, ca. 22° Shore A, 2 mm

**CUSHIONING MULTI-ZONE LEVEL**  
long  
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 2 mm  
Multiforte black, approx. 40° Shore A, 2 mm  
p<sup>2</sup> absorb, green, approx. 22° Shore A, 2 mm

**MEHRZONENUNTERBAU**  
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 12 mm

**MULTI-ZONE BASE**  
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 12 mm

**VERSTÄRKUNG**  
THK

**REINFORCEMENT**  
THK



**für ausdauernd sportliche Aktivitäten**  
for high-endurance sporting activities



**POLSTER FUNKTIONSEBENE**  
langsohlig  
p<sup>2</sup> rebound, rot,  
ca. 15° Shore A, 2 mm  
federnd, energierückführend

**CUSHIONING FUNCTIONAL LEVEL**  
long  
p<sup>2</sup> rebound, red,  
approx. 15° Shore A, 2 mm  
springy, energy-returning

ART.-NR.  
CODE NO.  
978130000

**POLSTER MEHRZONENEbene**  
langsohlig  
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 2 mm  
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 2 mm  
p<sup>2</sup> rebound, rot, ca. 15° Shore A, 2 mm

**CUSHIONING MULTI-ZONE LEVEL**  
long  
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 2 mm  
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 2 mm  
p<sup>2</sup> rebound, red, approx. 15° Shore A, 2 mm

**MEHRZONENUNTERBAU**  
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 12 mm

**MULTI-ZONE BASE**  
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 12 mm

**VERSTÄRKUNG**  
THK

**REINFORCEMENT**  
THK



SPORT  
SPORTS

# NOVAPED SPORTS

Novaped Sports Einlagenrohlinge sind für verschiedene Sportarten und ihre spezifischen Bewegungs- und Belastungsmuster konzipiert. Mit einem Höchstmaß an Tragekomfort beugen sie Überlastungen vor und tragen zur Linderung von bereits bestehenden Beschwerden bei. Es handelt sich um hochwertige Kunststoffrohlinge in bewährter Folientechnik, die sich durch eine geringe Bauhöhe und eine an die jeweiligen Sportschuharten angepasste Passform auszeichnen.

Novaped Sports insole blanks are designed for different sports and their specific movement and stress patterns. They prevent overstraining and contribute to the relief of already existing complaints with a very high level of wearing comfort. They are high-quality synthetic blanks with proven film technology, which are characterised by a low construction height with a coordinated fit to the respective types of sports shoes.



**TORSIONSSTÜTZE**  
TORSION SUPPORT

**ENTLASTUNGSPOLSTER**  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 1,5 mm

**PRESSURE-RELIEVING PAD**  
p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 1,5 mm

**VERSTÄRKUNG**  
Scheinflex

**REINFORCEMENT**  
Scheinflex

**UNTERBAU**  
Folientechnik

**BASE**  
film technology



ART.-NR.  
CODE NO.  
987620000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
987620000	35-53	Laufen/Wandern/Nordic Walking Running/Walking/Nordic Walking	Pigreco, orange Pigreco, orange	p <sup>2</sup> resorb, schwarz p <sup>2</sup> resorb, black	Tropfenform drop shape	breit wide
987624000	35-46	Laufen/Wandern/Nordic Walking Running/Walking/Nordic Walking	Pigreco, orange Pigreco, orange	p <sup>2</sup> resorb, schwarz p <sup>2</sup> resorb, black	Tropfenform drop shape	schmal narrow
987610000	29/30-33/34 35-48	Fußball Soccer	ARU-X-Static, schwarz ARU-X-Static, black	p <sup>2</sup> resorb, schwarz p <sup>2</sup> resorb, black	Tropfenform drop shape	schmal narrow

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.  
CODE NO.  
987610000

**FUSSBALL**  
Zusatzpolster des Großzehballens/  
Unterstützung Vorfußaußenrand  
schalige Rückfußfassung

**SOCCER**  
additional cushioning of the ball of the big toe/  
support of forefoot outer edge  
cup-shaped back part of the foot



# NOVAPED ACTIVE

Die in Frästechnik hergestellten Novaped Active Einlagenrohlinge sind für die spezifischen Anforderungen im Breitensport konzipiert. Um Überlastungsschäden entgegenzuwirken bieten sie optimale Stabilität und Dämpfung der Füße, Knie- und Hüftgelenke sowie der Wirbelsäule. Sie bestehen aus Fräsmaterial in unterschiedlichen Shore-Härten in mehrschichtig horizontaler Ausführung und bieten orthopädisch wirksame Unterstützung der Fußgewölbe. Die Fräsrohlinge sind leicht zu beschleifen und gut zu verkleben.

The Novaped Active insole blanks manufactured using milling technology are designed for sport-specific requirements in mass sports. To counteract overuse injuries, they offer optimal stability and cushioning for the feet, knee and hip joints and the spine. They consist of milling material in different Shore hardnesses in a multi-layer horizontal design and offer orthopaedically effective support for the arch of the foot. The milling blanks are easy to grind and glue well.

**UNTERBAU**  
EVA Fräsmaterial,  
blau, 45° Shore A

**BASE**  
EVA milling material,  
blue, 45° Shore A



**FRÄSMATERIAL**  
EVA Fräsmaterial, weiß, 35° Shore A

**MILLING MATERIAL**  
EVA milling material, white, 35° Shore A

**FRÄSMATERIAL**  
EVA Fräsmaterial, blau, 45° Shore A

**MILLING MATERIAL**  
EVA milling material, blue, 45° Shore A

ART.-NR.  
CODE NO.  
772001000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FRÄSMATERIAL MILLING MATERIAL	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
772001000	35-50	Active Herren Active men	EVA Fräsmaterial, blau/weiß EVA milling material, blue/white	anatomisch anatomical	breit wide
772002000	35-48	Active Damen Active women	EVA Fräsmaterial, blau/gelb EVA milling material, blue/yellow	anatomisch anatomical	universal universal
772004000	29/30-33/34 35-50	Active Fußball Active soccer	EVA Fräsmaterial, blau/türkis EVA milling material, blue/turquoise	anatomisch anatomical	schmal narrow

PRODUKTALTERNATIVE  
PRODUCT ALTERNATIVE



**ACTIVE DAMEN**  
**ACTIVE WOMEN**

ART.-NR.  
CODE NO.  
772002000



ART.-NR.  
CODE NO.  
772004000

**ACTIVE FUSSBALL**  
**ACTIVE SOCCER**




SPORT  
SPORTS



# NOVAPED SOFT PROTECT

Die Novaped Soft Protect Einlagenrohlinge sind speziell für den Einsatz in Sicherheitsschuhen der angegebenen Sicherheitsschuhhersteller entwickelt. Durch die Verwendung der zertifizierten Bezugsstoffe und die Einhaltung der Fertigungsanweisungen sind diese konform mit den Baumusterprüfbescheinigungen der Sicherheitsschuhhersteller. Eine Auflistung der zertifizierten Sicherheitsschuhe kann bei den Sicherheitsschuhherstellern angefordert oder heruntergeladen werden.

Novaped Soft Protect insole blanks are specially developed for use in safety shoes from the indicated safety shoe manufacturers. If used with the certified cover materials and in compliance with the manufacturing instructions, they are compliant with the type examination certificates of the safety shoe manufacturers. A list of certified safety shoes can be requested from the safety shoe manufacturers or downloaded on their website.

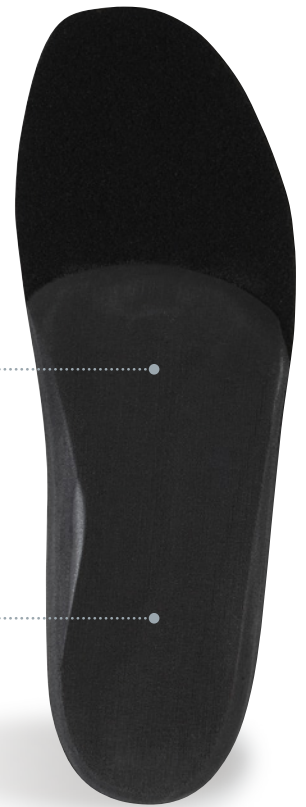

## UNTERBAU

Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 12 mm

## BASE

Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 12 mm

## VERSTÄRKUNG

THK

## REINFORCEMENT

THK



## FERSENPOLSTER

p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 2 mm

## HEEL PAD

p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 2 mm

## BEZUG/POLSTER-KOMBINATION

langsohlig  
ELTEN ESD Pro, schwarz, 4,3 mm

## COVER/CUSHIONING COMBINATION

long  
ELTEN ESD Pro, black, 4,3 mm

ART.-NR.  
CODE NO.  
979610000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG/POLSTER KOMBINATION COVER/CUSHIONING COMBINATION	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979610000	35-50	ELTEN	ELTEN ESD Pro, schwarz, 4,3 mm ELTEN ESD Pro, black, 4,3 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal
979614000	35-50	ATLAS	ATLAS Ergo-Med, schwarz, 2,5 mm ATLAS Ergo-Med, black, 2,5 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal
979612000	35-50	STEITZ SECURA	STEITZ SECURA Ergo Soft ESD, schwarz, 2 mm STEITZ SECURA Ergo Soft ESD, black, 2 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal
979613000	35-50	HAIX	HAIX CO-System, weiß/grün, 3,7 mm HAIX CO-System, white/green, 3,7 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal



**FERSENPOLSTER**  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz,  
ca. 12° Shore A, 2 mm

**HEEL PAD**  
p<sup>2</sup> resorb, black,  
approx. 12° Shore A, 2 mm

ART.-NR.  
CODE NO.  
979614000



**BEZUG/POLSTER-KOMBINATION**  
langsohlig  
ATLAS Ergo-Med, schwarz, 2,5 mm

**COVER/CUSHIONING COMBINATION**  
long  
ATLAS Ergo-Med, black, 2,5 mm

**UNTERBAU**  
Multiforte, schwarz,  
ca. 40° Shore A,  
12 mm

**BASE**  
Multiforte, black,  
approx. 40° Shore A,  
12 mm

**VERSTÄRKUNG**  
THK

**REINFORCEMENT**  
THK



ART.-NR.  
CODE NO.  
979612000



**BEZUG/POLSTER-KOMBINATION**  
langsohlig  
STEITZ SECURA Ergo Soft ESD, schwarz, 2 mm


**COVER/CUSHIONING COMBINATION**  
long  
STEITZ SECURA Ergo Soft ESD, black, 2 mm

**BESONDERHEIT**  
Vorfußperforation

**CHARACTERISTICS**  
forefoot perforation

**UNTERBAU**  
Multiforte, schwarz,  
ca. 40° Shore A,  
12 mm

**BASE**  
Multiforte, black,  
approx. 40° Shore A,  
12 mm

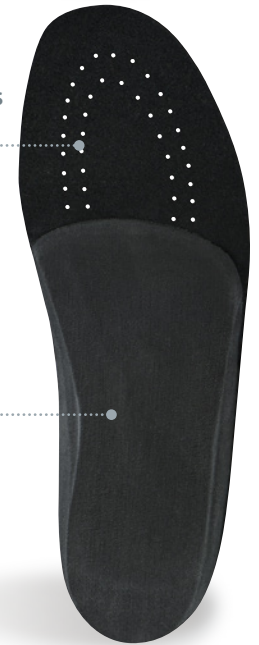

**FERSENPOLSTER**  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz,  
ca. 12° Shore A, 2 mm

**HEEL PAD**  
p<sup>2</sup> resorb, black,  
approx. 12° Shore A, 2 mm

ART.-NR.  
CODE NO.  
979613000



**BEZUG/POLSTER-KOMBINATION**  
langsohlig  
HAIX CO-System, weiß/grün, 3,7 mm

**COVER/CUSHIONING COMBINATION**  
long  
HAIX CO-System, white/green, 3,7 mm

**UNTERBAU**  
Multiforte, schwarz,  
ca. 40° Shore A,  
12 mm

**BASE**  
Multiforte, black,  
approx. 40° Shore A,  
12 mm

**VERSTÄRKUNG**  
THK

**REINFORCEMENT**  
THK



SICHERHEIT  
SAFETY

# NOVAPED FLEX BASIC

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus zuverlässigen und erprobten Materialien hergestellt. Der stützende Novaped Flex Basic Einlagenrohling weist ein moderates Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse auf. Dabei lässt sich der Einlagenkern thermoplastisch verformen und ermöglicht eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The supportive Novaped Flex Basic insole blank has a moderate longitudinal arch with a slightly guided heel. The insole core can be thermoplastically formed and allows quick and easy individual adjustment to the foot.



**POLSTER**  
langsohlig  
Multiform, beige,  
ca. 30° Shore A, 3 mm

**CUSHIONING**  
long  
Multiform, beige,  
approx. 30° Shore A, 3 mm

**BEZUG**  
Paraskin perforiert, beige

**COVER**  
Paraskin perforated, beige



**UNTERBEZUG**  
Paraskin, 3/4-lang

**BASE COVER**  
Paraskin, 3/4 length

**VERSTÄRKUNG**  
flexibler Stratos-Kern

**REINFORCEMENT**  
flexible Stratos core

ART.-NR.  
CODE NO.  
959001000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE COVER	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
959001000	35-48	Flex Basic Flex Basic	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Paraskin, beige Paraskin, beige	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal



# NOVAPED FLEX BASIC CALCANEUS

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus strapazierfähigen und erprobten Materialien hergestellt. Der stützende Novaped Flex Basic Calcaneus Einlagenrohling hat eine Aussparung in der Fersenmitte mit zusätzlicher Polsterung für den Einsatz bei Überlastungssymptomen oder Schmerzen im Bereich des Calcaneus. Der Einlagenrohling weist ein moderates Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse auf. Dabei lässt sich der Einlagenkern thermoplastisch verformen und ermöglicht eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The supportive Novaped Flex Basic Calcaneus insole blank has a cutout in the centre of the heel with additional padding for use in case of overuse symptoms or pain in the area of the calcaneus. The insole blank has a moderate longitudinal arch with a slightly guided heel. The insole core can be thermoplastically formed and allows quick and easy individual adjustment to the foot of the user.



**POLSTER**  
langsohlig  
Multiform, beige,  
ca. 30° Shore A, 3 mm

**CUSHIONING**  
long  
Multiform, beige,  
approx. 30° Shore A, 3 mm

**UNTERBEZUG**  
Paraskin, 3/4-lang

**BASE COVER**  
Paraskin, 3/4 length

**VERSTÄRKUNG**  
flexibler Stratos-Kern  
mit Fersenaussparung und  
Polster aus ARU®foam,  
lachs, ca. 10° Shore A, 3 mm

**REINFORCEMENT**  
flexible Stratos core  
with heel cutout and  
cushioning made of ARU®foam,  
salmon, approx. 10° Shore A, 3 mm

**BEZUG**  
Paraskin perforiert, beige

**COVER**  
Paraskin perforated, beige



ART.-NR.  
CODE NO.  
959010000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE COVER	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
959010000	35-48	Flex Basic Calcaneus Flex Basic Calcaneus	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Paraskin, beige Paraskin, beige	Tropfenform 2031 drop shape 2031	breit wide

# NOVAPED SOFT BASIC

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus strapazierfähigen und erprobten Materialien hergestellt. Der in Weichpolstertechnik hergestellte bettende Novaped Soft Basic Einlagenrohling sorgt dabei für effektive Druckentlastung des Fußes. Er weist ein moderates Längsgewölbe mit halbschalig geführter Ferse auf. Der vorgeschliffene langsohlige Unterbau lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The Novaped Soft Basic insole blank, manufactured using soft cushioning technology, provides effective pressure relief for the foot. It has a moderate longitudinal arch with a half-shell heel. The long pre-ground base can be thermoformed and easily adjusted, allowing quick and easy customisation to the user's foot.



**POLSTER**  
langsohlig  
Multiform, beige,  
ca. 30° Shore A, 3 mm

**CUSHIONING**  
long  
Multiform, beige,  
approx. 30° Shore A, 3 mm


ART.-NR.  
CODE NO.  
979010006

**UNTERBAU**  
langsohlig, vorgeschliffen  
Multiforte, beige, ca. 40° Shore A,  
10 mm

**BASE**  
long, pre-ground  
Multiforte, beige, approx. 40° Shore A,  
10 mm

**VERSTÄRKUNG**  
EVA, ca. 60° Shore A

**REINFORCEMENT**  
EVA, approx. 60° Shore A

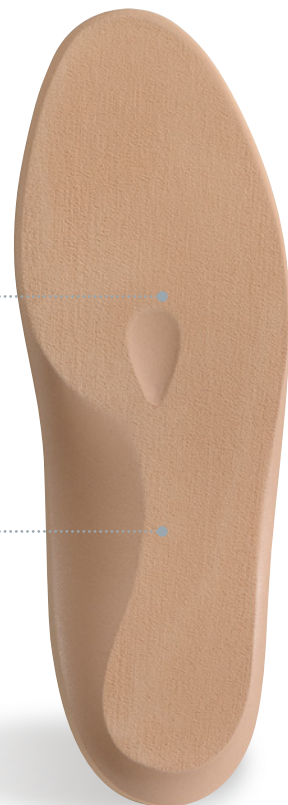

**BEZUG**  
Paraskin perforiert, beige

**COVER**  
Paraskin perforated, beige



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979010006	35-48	Soft Basic Soft Basic	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Multiforte, beige Multiforte, beige	Tropfenform drop shape	breit wide

# NOVAPED KORK BASIC

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus strapazierfähigen und erprobten Materialien hergestellt. Der bettende Novaped Kork Basic Einlagenrohling sorgt dabei für Druckentlastung und gleichzeitige Stabilisierung des Fußes. Er weist ein moderates Längsgewölbe mit halbschalig geführter Ferse auf. Der vorgeschliffene Thermokork-Unterbau lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The cushioning Novaped Cork Basic insole blank provides pressure relief and stabilisation of the foot at the same time. It features a moderate longitudinal arch with a half-shell heel. The pre-ground thermo-cork base can be thermoformed and easily adjusted, allowing quick and easy individual adaptation to the user's foot.



**POLSTER**  
langsohlig  
Multiform, beige,  
ca. 30° Shore A, 3 mm

**CUSHIONING**  
long  
Multiform, beige,  
approx. 30° Shore A, 3 mm

**BEZUG**  
Paraskin, beige


**COVER**  
Paraskin, beige

**UNTERBAU**  
Kunstkork S/ARU®fant, beige  
ca. 50° Shore A, 10 mm

**BASE**  
artificial cork S/ARU®fant, beige  
approx. 50° Shore A, 10 mm

**VERSTÄRKUNG**  
THK

**REINFORCEMENT**  
THK

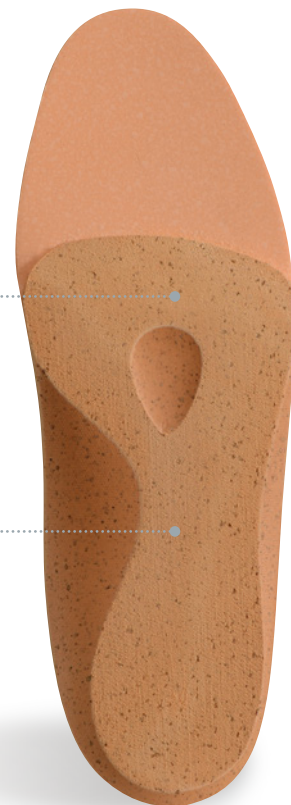

ART.-NR.  
CODE NO.  
979000006



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979000006	35-48	Kork Basic Cork Basic	Paraskin, beige Paraskin, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Kunstkork S/ARU®fant, beige artificial cork S/ARU®fant, beige	Tropfenform drop shape	breit wide



03.0955; 12.03.23

 natureOffice.com/DE-221-29M.UXGR	Rohstoffe Transporte Produktion	g CO <sub>2</sub> e <b>246</b> pro Produkt	CO <sub>2</sub> -Emissionen ausgeglichen
---	---------------------------------------	--	---



099990303

Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5  
42897 Remscheid  
Germany  
Tel. +49 2191 910-200  
Fax +49 2191 910-100  
remscheid@schein.de  
www.schein.de

 schein	 orthopädie service
Germany since 1879	
<b>Wir helfen</b>	